


RAPID RESPONSE™ – TEST ANTIGÉNIQUE RAPIDE POUR LA COVID-19

Lavez-vous les mains avant de faire le test et utilisez une surface plane et propre.




ÉTAPE 1 – PRÉPAREZ LE TEST

- Avant de prendre votre échantillon, placez le tube à échantillon en position verticale (p. ex. en le plaçant dans le petit plateau de plastique).
- Videz le contenu de l'une des capsules de solution de dépistage au complet dans le tube.

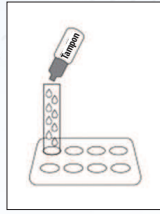



ÉTAPE 2 – ÉCOUVILLONNAGE NASAL

- Retirez l'écouvillon de son emballage. Assurez-vous que le bout de l'écouvillon ne touche rien.
- Demandez à l'enfant de pencher la tête vers l'arrière et insérez l'écouvillon dans sa narine à une profondeur de deux centimètres.
- En faisant un mouvement circulaire, frottez la paroi interne de la narine cinq fois.
- Fermez la narine avec votre doigt pour y tenir l'écouvillon puis tournez l'écouvillon sur lui-même cinq fois.
- Retirez l'écouvillon et refaites la même chose (frotter la paroi interne cinq fois et faire tourner l'écouvillon cinq fois) dans l'autre narine (avec le même écouvillon).

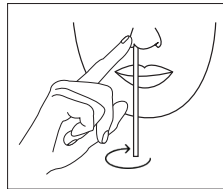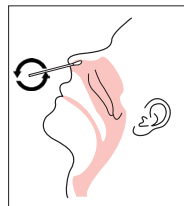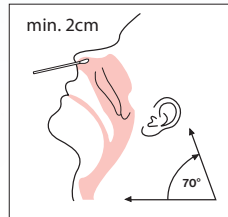


ÉTAPE 3 – PROCÉDURES DE DÉPISTAGE

- Prenez le tube à échantillon et brassez l'écouvillon dans la solution 10 fois, jusqu'à ce que ce soit bien mélangé. Pincez l'écouvillon dans la solution de 10 à 15 fois en pressant sur les parois du tube autour de l'écouvillon.
- Laissez l'écouvillon dans le tube et placez le tube dans sa position verticale à nouveau puis attendez deux minutes (utilisez une horloge, une minuterie ou un chronomètre pour mesurer la durée).
- Retirez l'écouvillon du tube en tenant ses parois pour extraire autant de liquide que possible l'écouvillon peut être jeté à la poubelle (bac noir).
- Placez le bouchon avec l'embout sur le tube pour le sceller.

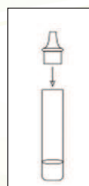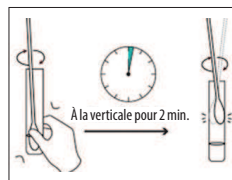


- Ouvrez le sachet étiqueté du mot « Cassette » et placez la cartouche de test sur une surface plane.
- Tournez le tube à échantillon scellé à l'envers et faites tomber trois gouttes de liquide dans le creux de la cartouche.
- **Réglez votre minuterie pour 15 minutes.** Dans environ 15 minutes, des lignes de couleurs apparaîtront et vous pourrez lire le résultat.

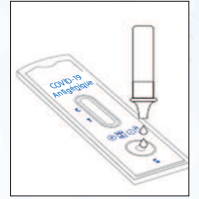

ÉTAPE 4 – LECTURE DU RÉSULTAT

- Si le résultat est **négatif**, continuez de surveiller l'apparition de symptômes et refaites le test après 48 heures. *Les tests antigéniques rapides sont moins exacts que les tests PCR, ce qui signifie que si un test rapide donne un résultat négatif, il doit être refait après 48 heures.* Même si le résultat de votre premier test est négatif, en restant à la maison si vous êtes malade ou avez des symptômes, vous aiderez à protéger les autres d'une possible exposition au virus. Si vous êtes incertain si vous devez envoyer votre enfant à l'école après l'obtention d'un résultat négatif, consultez le questionnaire de dépistage des élèves au : https://www.princeedwardisland.ca/sites/default/files/publications/student_prescreening_checklist_fre.pdf
- Si le résultat est **invalide**, vous pouvez faire un deuxième test rapide ou vous rendre dans une clinique de dépistage provinciale pour faire un test PCR de laboratoire.
- Si le résultat du premier ou deuxième test est **positif**, l'enfant devrait s'isoler immédiatement avec un parent/tuteur. Veuillez vous rendre à une clinique de dépistage provinciale avec l'enfant et informez le personnel que votre enfant a obtenu un résultat positif lors d'un test rapide à domicile. Consultez la liste des heures d'ouverture et des lieux des cliniques au : princeedwardisland.ca/fr/depistageCOVID
- Pendant que vous attendez le résultat du test PCR de laboratoire que vous avez fait à la clinique de dépistage provinciale, veuillez faire parvenir un courriel à hometestkit@gov.pe.ca et indiquer le nom et les coordonnées de l'enfant qui a eu un résultat positif en utilisant la trousse de dépistage Rapid Response™.
- Après que vous avez terminé le processus, placez tout le contenu de la trousse aux poubelles (bac noir).

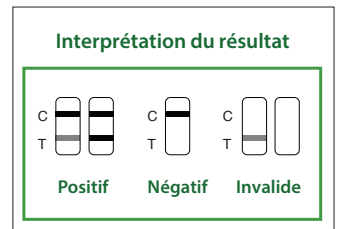

Pour une vidéo présentant les étapes, consultez le :



PrinceEdwardIsland.ca/fr/TrousseDepistageDomicile